



ERGO

PROFESSIONAL  
TECHNOLOGIES  
FOR BODY

MADE IN ITALY



Magic è un'area innovativa dedicata alla bellezza, ai trattamenti antiage e alla *mise en forme* di uomini e donne, in cui le apparecchiature elettroestetiche di ultima generazione, Made in Italy e conformi alle normative legislative vigenti, si sposano con protocolli metodologici e prodotti cosmetici a marchio Eurosun pensati per esaltare l'efficacia dei risultati e la personalizzazione dei trattamenti.

magic **LASER808 HR600**  
LASER DIODO PER EPILAZIONE

EPILAZIONE PROGRESSIVA PERMANENTE

MAGIC LASER DIODO 808 HR600 della potenza massima di 1200W è stata espressamente pensata e realizzata per effettuare trattamenti di epilazione con una emissione di luce laser a 808nm che rallenta il processo di crescita del pelo, inibendo la rigenerazione dello stesso. Idoneo a trattare tutti i fototipi e le pelli anche molto abbronzate.

- Indolore
- Veloce (fino a 5 flash in 1 secondo)
- Forte shock termico a esclusivo assorbimento della melanina
- Risultato sin dalle prime sedute



CARATTERISTICHE TECNICHE

Pannello di controllo Touch Screen 8" colori  
Programmi Epilazione a zone  
Manipolo alta efficienza DNRO Ocular Distance 4.6 m  
Lunghezza d'onda 808 nm  
Densità 40 J/cm<sup>2</sup>  
Potenza massima di emissione 1200W  
Durata impulso 10 ms - 300 ms  
caratteristiche sistema di emissione da 1 a 12 impulsi multi spot al secondo  
da a 3 impulsi single spot frazionato  
Sistema di raffreddamento acqua ultrapura  
Temperatura manipolo - 5° C ~ + 10° C  
Tensione di alimentazione 230V - 50~60Hz  
Potenza assorbita 600VA  
Classe di appartenenza IV



EPILAZIONE PROGRESSIVA PERMANENTE

La potenza di MAGIC LASER808 HR600 garantisce il forte shock termico a esclusivo assorbimento della melanina che determina i risultati dei trattamenti di epilazione, quindi massima efficacia in assoluta sicurezza. MAGIC LASER808 HR600 è una delle possibili soluzioni di depilazione cosmetica per minimizzare i problemi di tipo estetico causati dall'irsutismo. I trattamenti risultano brevi, piacevoli, indolori, il risultato è evidente fin dalle prime sedute.

Il manipolo ad alta efficienza è in grado di effettuare diversi milioni di spot, la gestione non necessita di particolari manutenzioni, unita alla velocità di esecuzione con minor impiego dell'operatore, tutti fattori che abbattano i costi di esercizio.



Carrello bianco con ruote flottanti  
Dimensioni totali di ingombro solo carrello L 54cm x P 40cm x H 118cm

# magic **BRFE**

## LIPOLASER & RADIOFREQUENZA & ELETTROPORAZIONE

ANTI AGE , LIFTING, RASSODANTE, DRENANTE, BIOREVITALIZZAZIONE NON INVASIVA, OSSIGENAZIONE DEL TESSUTO, STIMOLAZIONE LINFATICA E DEL FLUSSO EMATICO, ANTICELLULITE.

Il lipolaser combina tecnologie di radiofrequenza ed elettroporazione in un dispositivo futuristico e innovativo, 100% Made in Italy e conforme agli standard CE. La tecnologia RF di BIOLIFE PORATION è composta da elettrodi RF capacitivi e resistivi di diverse dimensioni.

Con gli elettrodi capacitivi si possono eseguire trattamenti ANTI-AGE come lifting, tonificazione e anticellulite, mentre gli elettrodi resistivi (usati da personale specializzato) sono adatti a trattamenti di resurfacing, fisioterapia e terapia del dolore. La tecnologia RF grazie ad un innovativo software (NLP opzionale) è in grado di indicare a display il raggiungimento nel tessuto della temperatura ottimale guidando l'operatrice nel trattamento, per incrementare il risultato di ogni sezione, viso e corpo. La tecnologia di Elettroporazione consente la veicolazione in profondità di prodotti nanostrutturati come mesoterapia senza aghi, è un sistema INDOLORE, NON INVASIVO, SENZA RISCHI ed EFFETTI COLLATERALI.

Consiste nell'applicazione di brevi impulsi elettrici speciali che agiscono sugli spazi intercellulari lipidici provocando cambi molecolari che portano alla formazione di micopori che aumentano temporaneamente la permeabilità cutanea.

Elettroveicolazione consiste nel trasporto selettivo di principi attivi specifici direttamente nei distretti viso e/o corpo da trattare. Questo avviene durante la permeabilità cutanea provocata dall'elettroporazione, mediante elettrorepulsione ionica di principi attivi polarizzati positivamente.

**I prodotti non contengono: parabeni - isotiazolinoni – coloranti – profumi**

La combinazione di queste due tecniche fornisce profondità diverse anti-age risultati duraturi e visibili con una sensazione confortevole e piacevole durante l'applicazione.

- CORPO RF Radiofrequenza e IR infrarossi 770-950nm combinati. L'infrarosso aumenta la permeabilità della membrana degli adipociti e stimola il metabolismo mitocondriale.
- VISO RF Radiofrequenza e IR infrarossi 770-860nm combinati. L'infrarosso aumenta l'effetto di ringiovanimento della cute attivando la fotobiomodulazione.
- Elettroporazione manipolo corpo e manipolo viso + piastra.
- Radiofrequenza viso corpo (dischi varie dimensioni + piastra).

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Pannello di controllo touch screen LCD - 5,7" colori  
Connessione alla rete 230Volt  
Frequenza 50/60 Hz  
Potenza assorbita 130 VA  
Potenza di uscita capacitiva estetica 50W max  
Caratt. di uscita frequenza 457KHz  
Caratt. di uscita generatore impulsi media frequenza  
I out= 1,5 mA/cm² a 2,5 KHz  
Carico 500ohm  
V max= 130V a 2,5 KHz

Assortimento manipoli elettroporazione per trattamenti viso e corpo  
Assortimento dischi intercambiabili per trattamenti viso e corpo di radiofrequenza




### 9 TRATTAMENTI VISO

ANTI-AGE, EFFETTO FILLER, EFFETTO LIFTING, NO CONTRACT, DEPIGMENTANTE, HYDRA ACTIVE, SEBO-REGO, NUTRI ACTIVE, EPILAZIONE PROGRESSIVA (dopo 10 trattamenti, dal 50 all'80% di diradamento).

### 7 TRATTAMENTI CORPO

RASSODANTE SENO, FRAGILITÀ CAPILLARE, RASSODANTE CORPO, SMAGLIATURE, DRENANTE, ADIPE E INESTETISMI CELLULITE, EPILAZIONE PROGRESSIVA (dopo 10 trattamenti, dal 50 all'80% di diradamento)

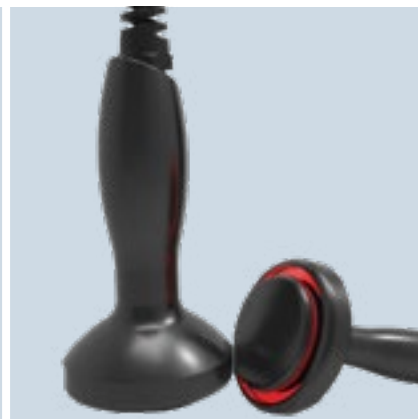

# magic **BLB**

## LIPOLASER VISO/CORPO & RADIOFREQUENZA

ANTI AGE, LIFTING, RASSODANTE, DRENANTE, BIOREVITALIZZAZIONE NON INVASIVA, OSSIGENAZIONE DEL TESSUTO, STIMOLAZIONE LINFATICA E DEL FLUSSO EMATICO, ANTICELLULITE.

Il lipolaser combina tecnologie di radiofrequenza ed elettroporazione in un dispositivo futuristico e innovativo, 100% Made in Italy e conforme agli standard CE.

La tecnologia RF di BIOLIFE PORATION è composta da elettrodi RF capacitivi e resistivi di diverse dimensioni.

Con gli elettrodi capacitivi si possono eseguire trattamenti ANTI-AGE come lifting, tonificazione e anticellulite, mentre gli elettrodi resistivi (usati da personale specializzato) sono adatti a trattamenti di resurfacing, fisioterapia e terapia del dolore. La tecnologia RF grazie ad un innovativo software (opzionale) è in grado di indicare a display il raggiungimento nel tessuto della temperatura ottimale guidando l'operatrice nel trattamento, per incrementare il risultato di ogni sezione, viso e corpo.

- CORPO RF Radiofrequenza e IR infrarossi 770-950nm combinati. L'infrarosso aumenta la permeabilità della membrana degli adipociti e stimola il metabolismo mitocondriale.
- VISO RF Radiofrequenza e IR infrarossi 770-860nm combinati. L'infrarosso aumenta l'effetto di ringiovanimento della cute attivando la fotobiomodulazione.
- Radiofrequenza viso corpo (dischi varie dimensioni + piastra).

### DOTAZIONI ACCESSORIE

NLP (GESTIONE TRATTAMENTI FOCALIZZATI):  
per effettuare un trattamento localizzato, indica sul display il raggiungimento nel tessuto della temperatura ideale di 45° guidando l'operatrice nel trattamento ottimale per incrementare il risultato di ogni zona, viso e corpo.  
Elenco delle zone selezionabili per il trattamento focalizzato

Carrello bianco 3 ripiani con ruote flottanti  
Dimensioni totali di ingombro solo carrello L 54cm x P 40cm x H 86cm



magic **RFE**  
RADIOFREQUENZA E ELETTROPORAZIONE

DUE APPARECCHIATURE IN UNA: VEICOLAZIONE PRINCIPI ATTIVI E RASSODAMENTO DEL TESSUTO

Dispositivo per trattamenti di radiofrequenza capacitiva monopolare unito al l’elettroveicolazione transdermica di principi attivi.

EFFICACE PER:

- Penetrazione profonda, rapida e selettiva di sostanze solubili con elevato peso molecolare (acido ialuronico, elastina, collagene etc,)
- Pelle idratata e distesa
- Rughe e solchi meno profondi
- Cellulite fibrosa
- Ipotonie cutanee
- Riduzione profondità delle rughe
- Aumento dell’ossigenazione del tessuto.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Pannello di controllo touch screen LCD - 5,7” colori  
Connessione alla rete 230Volt  
Frequenza 50/60 Hz  
Potenza assorbita 130 VA  
Potenza di uscita capacitiva estetica 50W max  
Caratt. di uscita frequenza 457KHz  
Caratt. di uscita generatore impulsi media frequenza  
I out= 1,5 mA/cm² a 2,5 KHz  
Carico 500ohm  
V max= 130V a 2,5 KHz  
  
Assortimento manipoli elettroporazione per trattamenti viso e corpo  
Assortimento dischi intercambiabili per trattamenti viso e corpo di radiofrequenza



magic **RFBM**  
RADIOFREQUENZA BIPOLARE E MONOPOLARE

RASSODAMENTO DEL TESSUTO VISO E CORPO

Dispositivo per trattamenti di radiofrequenza capacitiva monopolare e bipolare.

EFFICACE PER:

- Cellulite fibrosa
- Ipotonie cutanee
- Riduzione profondità delle rughe
- Aumento dell’ossigenazione del tessuto.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Pannello di controllo touch screen LCD - 5,7” colori  
Connessione alla rete 230Volt  
Frequenza 50/60 Hz  
Potenza assorbita 130 VA  
Potenza di uscita capacitiva estetica 50W max  
Caratt. di uscita frequenza 457KHz



DISPOSITIVO A CORRENTI INTERFERENZIALI, TONIFICAZIONE MICRO MUSCOLI DELLA PELLE

EFFICACE PER:

- Peeling meccanico con testine diamantate
- Vacuum viso
- Rassodamento muscolare viso, seno, pettorale, interno braccia e piccole zone del corpo
- Effetto lifting, rughe spianate, risollelamento, del contorno viso, ringiovanimento collo e décolleté
- Tonificazione e ringiovanimento mani
- Veicolazione pricipi attivi con elettroporazione.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Pannello di controllo touch screen LCD - 5,7" colori  
Connessione alla rete 230Volt  
Frequenza 50/60 Hz  
Potenza assorbita 20 VA  
Potenza di uscita capacitiva estetica 5W max  
Caratt. di uscita generatore impulsi media frequenza  
I out= 1,5 mA/cm² a 2,5 KHz  
Carico 500ohm  
V max= 130V a 2,5 KHz

Assortimento manipoli elettroporazione per trattamenti viso e corpo

Assortimento dischi intercambiabili per trattamenti viso e corpo di radiofrequenza



TRATTAMENTO TERMOLOCALIZZATO PER LO SNELLIMENTO DELLA SILHOUETTE

EFFICACE PER:

- Raggiungimento della silhouette ideale
- Migliorare la tonicità e l’elasticità della pelle



CARATTERISTICHE TECNICHE

Pannello di controllo display - 5,7" colori  
Connessione alla rete 230Volt  
Frequenza 50/60 Hz  
Potenza assorbita 420 VA  
Potenza di uscita 5 canali indipendenti 90W max  
Temperatura 48° max

RIMODELLAMENTO E RIDUZIONE LOCALIZZATA

Trattamento che associa in un'unica placca i potere snellente degli ultrasuoni al raffreddamento dei tessuti (aumenta il metabolismo localizzato dovuto al freddo) permettendo di ottenere risultati evidenti sin dalla prima seduta.

EFFICACE PER:

- Snellimento localizzato
- disgregazione cellule adipose
- Levigazione della pelle e miglioramento dell'ossigenazione dei tessuti
- Riduzione dell'effetto "buccia d'arancia"



CARATTERISTICHE TECNICHE

Pannello di controllo touch screen LCD - 5,7" colori  
Connessione alla rete 230Volt  
Frequenza 50/60 Hz  
Potenza assorbita 200 VA  
Potenza di uscita Ultrasuono F=1 MHz  
Pmax =1,5w/cm<sup>2</sup>  
Sistema di raffreddamento A cella di peltier



DISPOSITIVO PROFESSIONALE PER PRESSOTERAPIA

PRESSOMASSAGGIO & ELETTROSTIMOLAZIONE & INFRAROSSI

Il futuro del pressomassaggio tradizionale, associando a questa funzione la possibilità di combinare l'elettrostimolazione o gli infrarossi.

EFFICACE PER:

- Miglioramento del flusso della circolazione venosa e linfatica
- Linfodrenaggio
- Stimolazione della circolazione linfatica e della depurazione dell' organismo

ELETTROSTIMOLAZIONE:

- Stimolarezione,
- Rassodamento,
- Tonificazione,
- Definizione dei muscoli

INFRAROSSI:

- Interviene solo su zone circoscritte,
- Accelera i processi biologici,
- Aumento dell'azione metabolica e un maggior afflusso di ossigeno,
- Migliore irrorazione sanguigna
- Più rapida eliminazione delle tossine
- Ottimi risultati sia nei trattamenti snellenti che rassodanti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pannello di controllo touch screen a colori 12 programmi  
Connessione alla rete 230Volt  
Frequenza 50/60 Hz  
Potenza assorbita 110 VA  
Settori 8 indipendenti  
Pressione 200 mbar

Dotata di gambali, piedi, ventriera, pressore inguinale



Pannello di controllo Touch Screen a colori Programmi 4  
Connessione alla rete 230V  
Frequenza 50/60 Hz  
Settori 10 indipendenti (cuscini indipendenti piedi/gambe/ventre/braccia)  
Pressione 0.4 kg/cm<sup>2</sup> regolabile zona per zona indipendente  
Potenza infrarosso 0-70DC  
Settori infrarosso 5  
Potenza elettrostimolatore 0 - 4 mA  
Settori elettrostimolazione 5  
Potenza totale 70W

Dotata di gambali, piedi, ventriera, braccia, con sacca di raccolta da entrambi i lati

DUE APPARECCHIATURE IN UNA: SNELLIMENTO LOCALIZZATO, RIMODELLAMENTO E TONIFICAZIONE MUSCOLARE

Apparato ad ultrasuono con frequenza continua e modulata, recente ed innovativa tecnologia per la riduzione delle adiposità localizzate. Una tecnica efficace non invasiva né indolore, che permette di eliminare l’adipe in sicurezza attraverso un naturale processo fisiologico. Il continuo e ripetuto passaggio degli speciali manipoli permette di colpire solo gli accumuli di grasso della zona trattata. Già dal primo trattamento si evidenzia una perdita di volume consistente. Tutto questo unito a un dispositivo che applica livelli di depressione graduati e controllati sul corpo.

EFFICACE PER:

- Levigazione della pelle e miglioramento dell’ossigenazione dei tessuti trattati
- Ristrutturazione della pelle
- Irrorazione del tessuto cutaneo
- Aggressione del pannicolo adiposo localizzato
- Drenaggio dei tessuti
- Riduzione dell’effetto “buccia d’arancia”

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pannello di controllo touch screen LCD - 5,7” colori  
Connessione alla rete 230Volt  
Frequenza 50/60 Hz  
Potenza assorbita 90 VA  
Livello di vuoto 500 mbar  
Caratt. di uscita Ultrasuono F=1Mhz  
P. max 1 W/cm<sup>2</sup> (pulsato)  
1,5 W/cm<sup>2</sup> (continuo)



DISPOSITIVO A ONDE ACUSTICHE PER IL TRATTAMENTO DELLA LIPODISTROFIA

Questa apparecchiatura è una tecnologia elettromeccanica a onde acustiche. Quando l’impulso dell’onda colpisce il tessuto, indebolisce le fibre di collagene. La rivascolarizzazione e la rimodellazione del collagene son la risposta naturale del tessuto infiammato. Il risultato è il miglioramento visibile della lipodistrofia, comunemente nota come buccia d’arancia o cellulite. L’area trattata appare in poche sessioni visibilmente più levigata e più tonica. Il software intuitivo offre i protocolli pre-impostati facilitando l’ascelta dei parametri. Le cartucce facilmente sostituibili evitano perdite di tempo per la rigenerazione degli impulsi e diminuiscono i costi di usura.

EFFICACE PER:

- Stimolazione sanguigna e linfatica
- Stimolazione e produzione di collagene
- Miglioramento buccia d’arancia e cellulite
- Riduzione circonferenza
- Riduzione adipe
- Miglioramento elasticità
- Attivazione metabolismo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica 230V - 50Hz / 115V - 60Hz / 230V-60Hz  
Potenza media 350W  
Filtri Anti-polvere, batteriologico < 2.0 µm  
Raffreddamento compressore con ventilatore integrato  
Valori di flusso proposti 0 - 5l/min

Manipolo leggero ed elegante  
Tre testine per le diverse aree del corpo  
Cartucce facili da sostituire



FORTE AZIONE ENERGETICA A LIVELLO CELLULARE, GRANA CUTANEA PIÙ FINE E COMPATTA, IDRATAZIONE E COLORITO PIÙ OMOGENEI.

È un trattamento composto da una fase iniziale preparatoria con una soluzione alcalina e un neutralizzatore acido che riescono a saturare i legami che tengono unite le cellule dello strato corneo provocando un intenso e rapido ricambio dello strato corneo più esterno, Stimolando anche lo sviluppo degli strati più interni. La fase centrale consiste nell'applicazione di una maschera patch con acido ialuronico, Peptidi, acido fitico e acido citrico che apportano idratazione, ossigenazione ristrutturando l'apparato cutaneo. Nella fase finale si vaporizza una schiuma attiva che contiene acido alfa lipotico, acido ialuronico, dmae, vitamina e, retinolo, ceramidi, ossigeno nascente e aminoacidi dalla forte Azione antiossidante ed energetica a livello cellulare assieme ad una fiala composta da Ossigeno nascente e vitamine A e vitamine E.

EFFICACE PER:

- Forte azione energetica a livello cellulare
- Grana cutanea più fine e compatta
- Idratazione e colorito più omogenei

PRINCIPI ATTIVI

Preparatore: Ph 7;  
Neutralizzatore: Ph 3;  
Maschera Patch: Acido Ialuronico, Acido Fitico, Amino Peptidi, Acido Citrico;  
Schiuma: Acido Alfa Lipoico , Acido Ialuronico, Dmae, Vitamina E, Retinolo, Ceramide 3 Ossigeno nascente, Lisina, Prolina;  
Fiala: Ossigeno nascente arricchito di Vitamina A e Vitamina E;



È un kit contenente 4 trattamenti indicato nei cambiamenti di stagione su pelli dal colorito spento. Comprende un peeling chimico iniziale veloce, una maschera patch, una schiuma e una fiala finale.

PRINCIPI ATTIVI:

Preparatore: Ph 7;  
Neutralizzatore: Ph 3;  
Maschera Patch: Acido Ialuronico, Acido Fitico, Amino Peptidi, Acido Citrico;  
Schiuma: Acido Alfa Lipoico , Acido Ialuronico, Dmae, Vitamina E, Retinolo, Ceramide 3 Ossigeno nascente, Lisina, Prolina;  
Fiala: Ossigeno nascente arricchito di Vitamina A e Vitamina E;

CONSIGLI D'USO:

è un trattamento da eseguire 1 volta la settimana per 4 settimane, ciclicamente ai cambiamenti di stagione per stimolare e rinnovare l'epidermide. Si consigliano più cicli di trattamento annui, con preferenza nel periodo autunnale e primaverile.

RISULTATI:

Forte azione energetica a livello cellulare, grana cutanea più fine e compatta, idratazione e colorito più omogenei.



SISTEMI DI STERILIZZAZIONE PROFESSIONALI

Eurosun cura la vendita ai centri estetici di autoclavi professionali in grado di compiere il ciclo completo di sterilizzazione come richiesto dalla normativa vigente. Costruite in Italia, garantiti secondo la legge vigente, sono disponibili in vari modelli a seconda dell'utilizzo a cui sono destinati. Eurosun mette a disposizione dei gestori di centri estetici, abbronzatura, spa anche del personale altamente qualificato per dei corsi di formazione sull'utilizzo corretto e sulle diverse forme di sterilizzazione nei centri. Una linea di sterilizzatori innovativa studiata e testata per garantire la sicurezza di durata nel tempo e di garanzia per gli utenti.

SISTEMA DI STERILIZZAZIONE PROFESSIONALI

Nasce per soddisfare l'esigenza di una clientela che chiede sicurezza, affidabilità e semplicità unite in un unico strumento di sterilizzazione. L'esperienza, la tecnologia e la ricerca ci hanno permesso di realizzare l'obiettivo.

MODELLI

- Autoclave classe B 18 lt.
- Autoclave classe B 6 lt.
  
- Autoclave classe S 18 lt.
- Autoclave classe S 6 lt.
  
- Autoclave classe N 18 lt.
- Autoclave classe N 6 lt.

Direttive: 93/42CE – 97/23CE – CEI EN61326-1 – CEI EN 61010-1 –CEI EN 61010-2-40 - EN13060 (escluso mod. ENEN6-18)

CLASSE B



ENKB-18



ENKB-6

Autoclave Classe “B” 18 Lt, Vuoto Frazionato  
Con Pompa Vuoto Bistadio ad Alto rendimento, Camera INOX, vaporizzatore istantaneo, chiusura porta motorizzata, stampante termica a bordo, dispaly grafico, caricamento c/pompa autoaddescante, Sterilizza strumenti solidi, cavi, imbustati e porosi.  
Asciugatura Elettronica sottovuoto, Sistema MTS Memory Test System. Predisposizione per il riempimento e svuotamento automatici.  
3 cicli di test owie & Dick, Helix Test, Vacuum Test.  
Vassoi in dotazione n° 4.  
Dimensioni: L 505 x P 610 x H 400 mm  
Potenza: 2400W - 230/240V -50/60Hz – KG 36

Autoclave Classe “B” 6 Lt, Con Pompa Vuoto Bistadio ad Alto rendimento, Camera ALL, vaporizzatore istantaneo, chiusura porta motorizzata, stampante termica a bordo, dispaly grafico, caricamento c/pompa autoaddescante. Sterilizza strumenti solidi, cavi, imbustati e porosi. Asciugatura Elettronica sottovuoto, Sistema MTS Memory Test System. Predisposizione per il riempimento e svuotamento automatici.  
3 cicli di test owie & Dick, Helix Test, Vacuum Test.  
Vassoi in dotazione n° 1+2.  
Dimensioni: L 445 x P 610 x H 345 mm  
Potenza: 2500W - 230/240V -50/60Hz – KG 40

CLASSE N



ENKN-18



ENKN-6

Autoclave classe “N” 18 Lt Vuoto termodinamico Camera INOX, chiusura porta meccanica, dispaly LCD, caricamento c/pompa autoaddescante, 2 cicli sterilizzazione 121 e 134. Sterilizza strumenti solidi. Vassoi in dotazione n° 4.  
Dimensioni: L 445 x P 610 x H 400 mm  
Potenza: 2400W - 230/240V -50/60Hz – KG 40

Autoclave classe “N” 6 Lt Vuoto termodinamico Camera INOX, chiusura porta meccanica, dispaly LCD, caricamento c/pompa autoaddescante, 2 cicli sterilizzazione 121 e 134. Sterilizza strumenti solidi. Vassoi in dotazione n° 1+2.  
Dimensioni: L 445 x P 610 x H 400 mm  
Potenza: 2000W - 230/240V -50/60Hz – KG 40



SIGILLATRICE

CLASSE S



ENKS-18



ENKS-6

Autoclave Classe “S” 18 Lt Camera INOX, vaporizzatore istantaneo, chiusura porta motorizzata, stampante termica a bordo, dispaly grafico, caricamento c/pompa autoaddescante, 2 cicli di test. Sterilizza strumenti solidi, imbustati e piccoli carichi porosi. Vassoi in dotazione n° 4.  
Dimensioni: L 445 x P 610 x H 400 mm  
Potenza: 2400W - 230/240V -50/60Hz – KG 45

Autoclave Classe “S” 6 Lt Camera INOX, vaporizzatore istantaneo, chiusura porta motorizzata, stampante termica a bordo, dispaly grafico, caricamento c/pompa autoaddescante, 2 cicli di test. Sterilizza strumenti solidi, imbustati e piccoli carichi porosi. Vassoi in dotazione n° 1+2.  
Dimensioni: L 445 x P 610 x H 400 mm  
Potenza: 2400W - 230/240V -50/60Hz – KG 40



Viale Treviso, 23/b - 30026 Portogruaro VENEZIA (ITALY) - T +39 (0)421 73383 F +39 (0)421 74167 [info@eurosun.it](mailto:info@eurosun.it) [www.eurosun.it](http://www.eurosun.it)

